



「Pro.21」 起動時のセキュリティメッセージを表示しないようにする。

レジストリ エディタの使い方を誤ると、深刻な問題が発生することがあります。最悪の場合、Windows の再インストールが必要です。レジストリ エディタの誤用により発生した問題に関しては、一切責任を負わないものとします。レジストリ エディタは、自己の責任においてご使用ください。

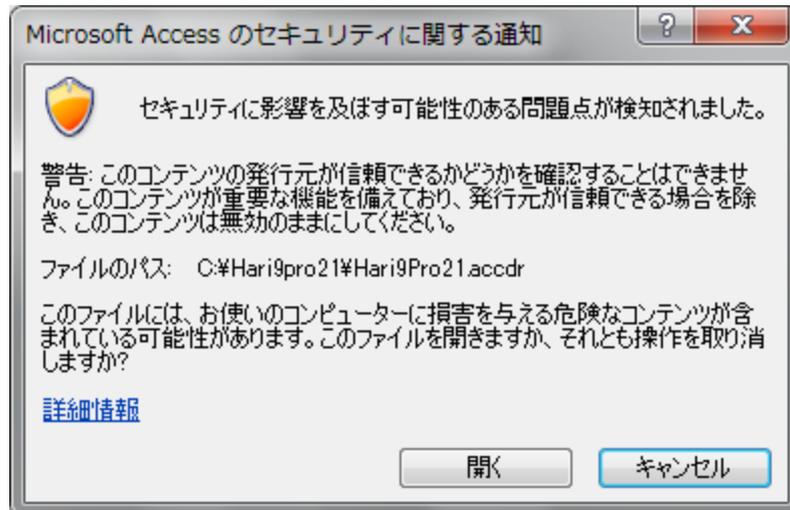


レジストリエディターで設定を変更します。


1. Windows 7 のスタートボタンをクリック後、regedit と入力して Enter

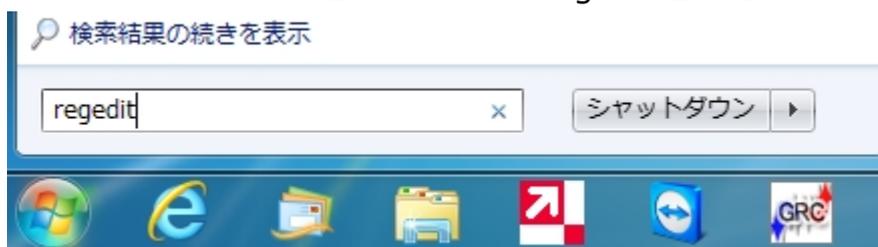


Windows 8 では Regedit を検索、実行する

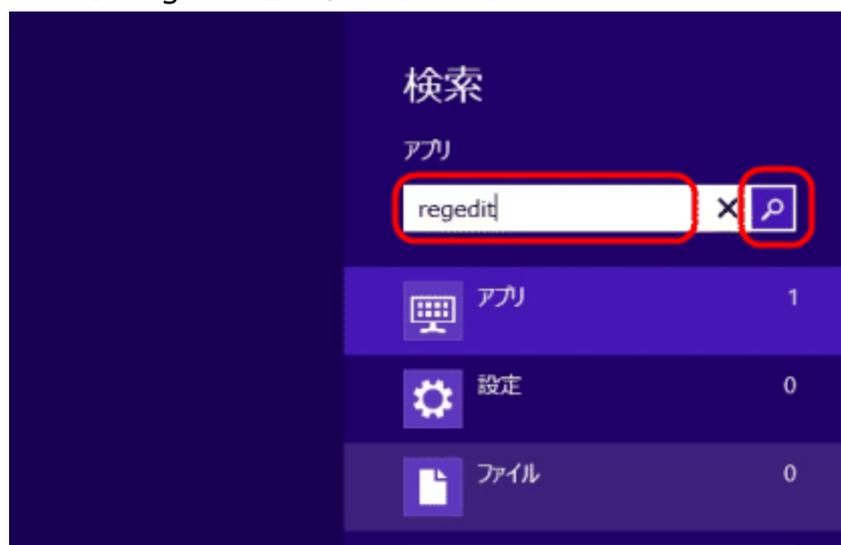


2. Hkey_current_user → Software → Microsoft を選択します。

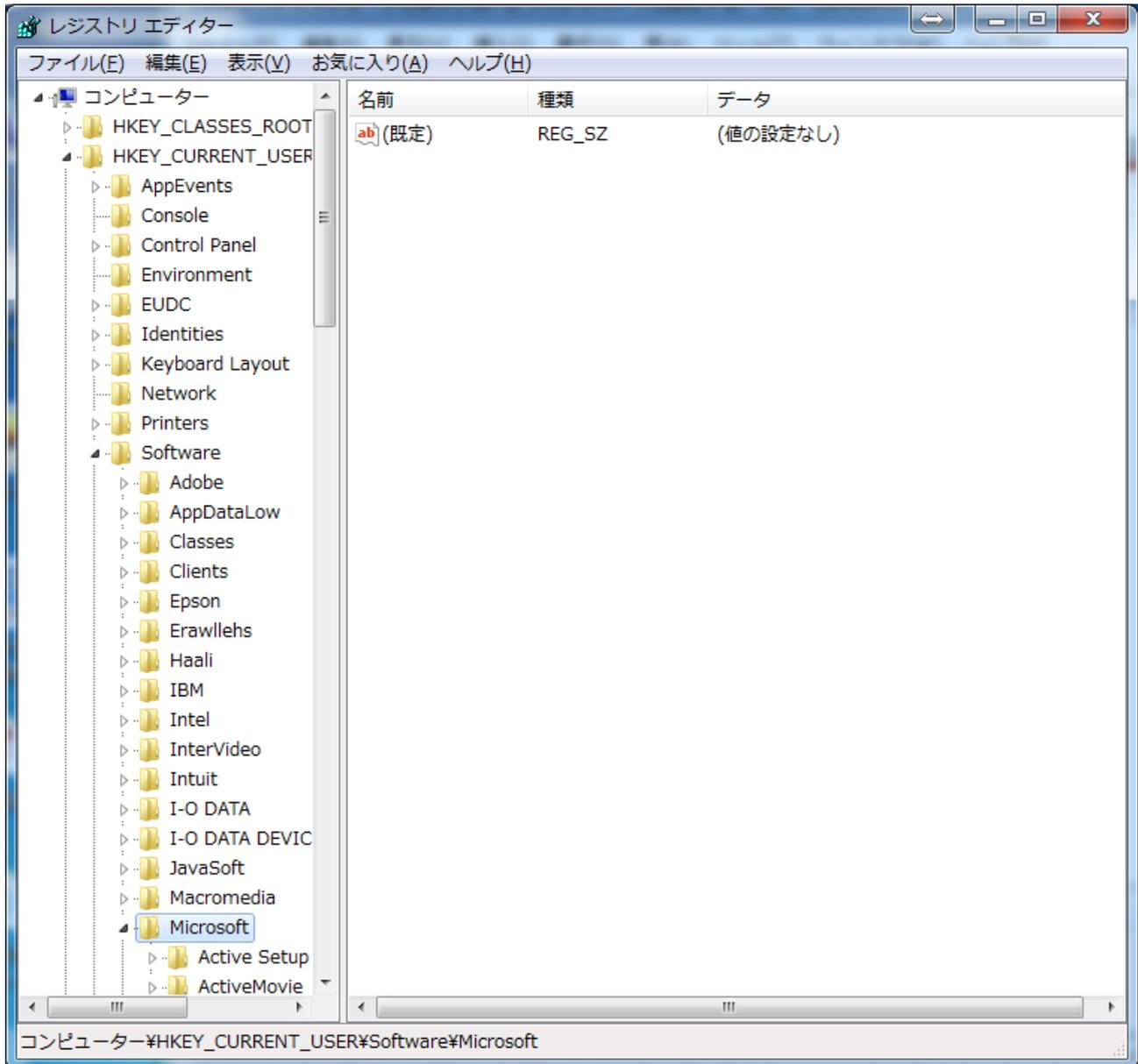


3. → Office → 14.0 → Access → Security → Trusted Locations を選択します。

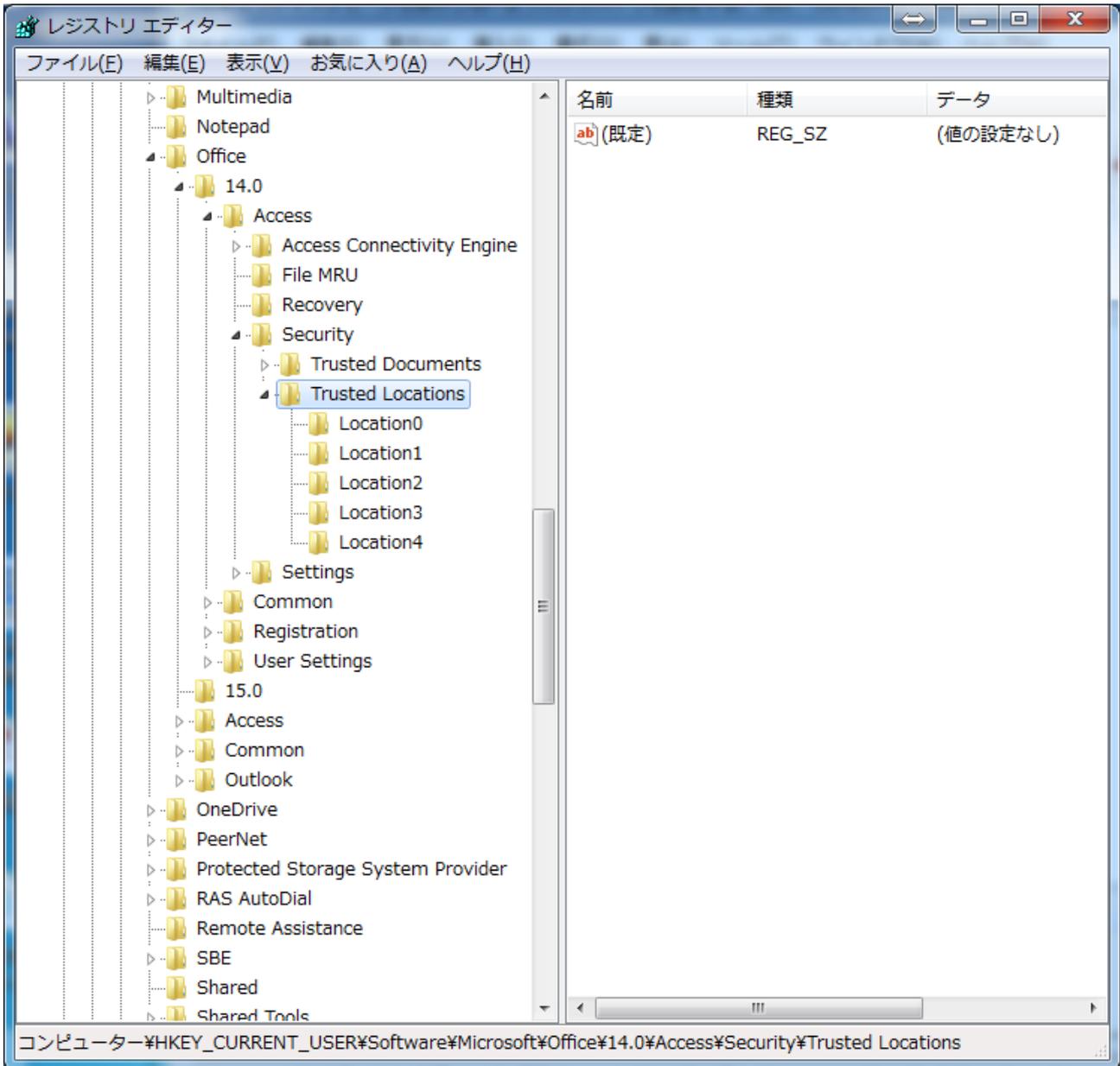


4. → Trusted Locations → 右クリック → 新規 → キー を選択します。

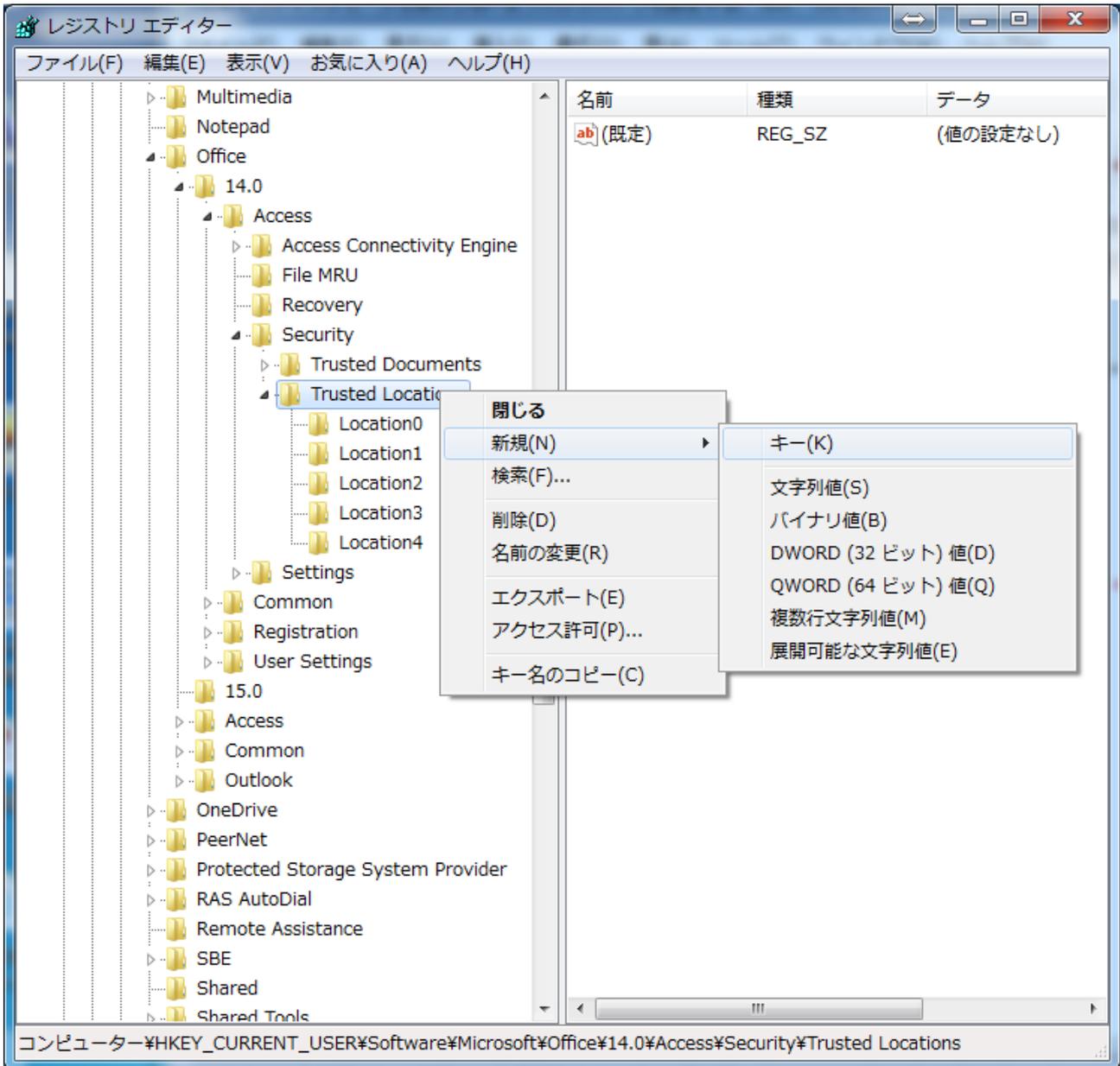


5. Locations? の最後の数字で続きの数字をつけて登録します。例えば、Locations5

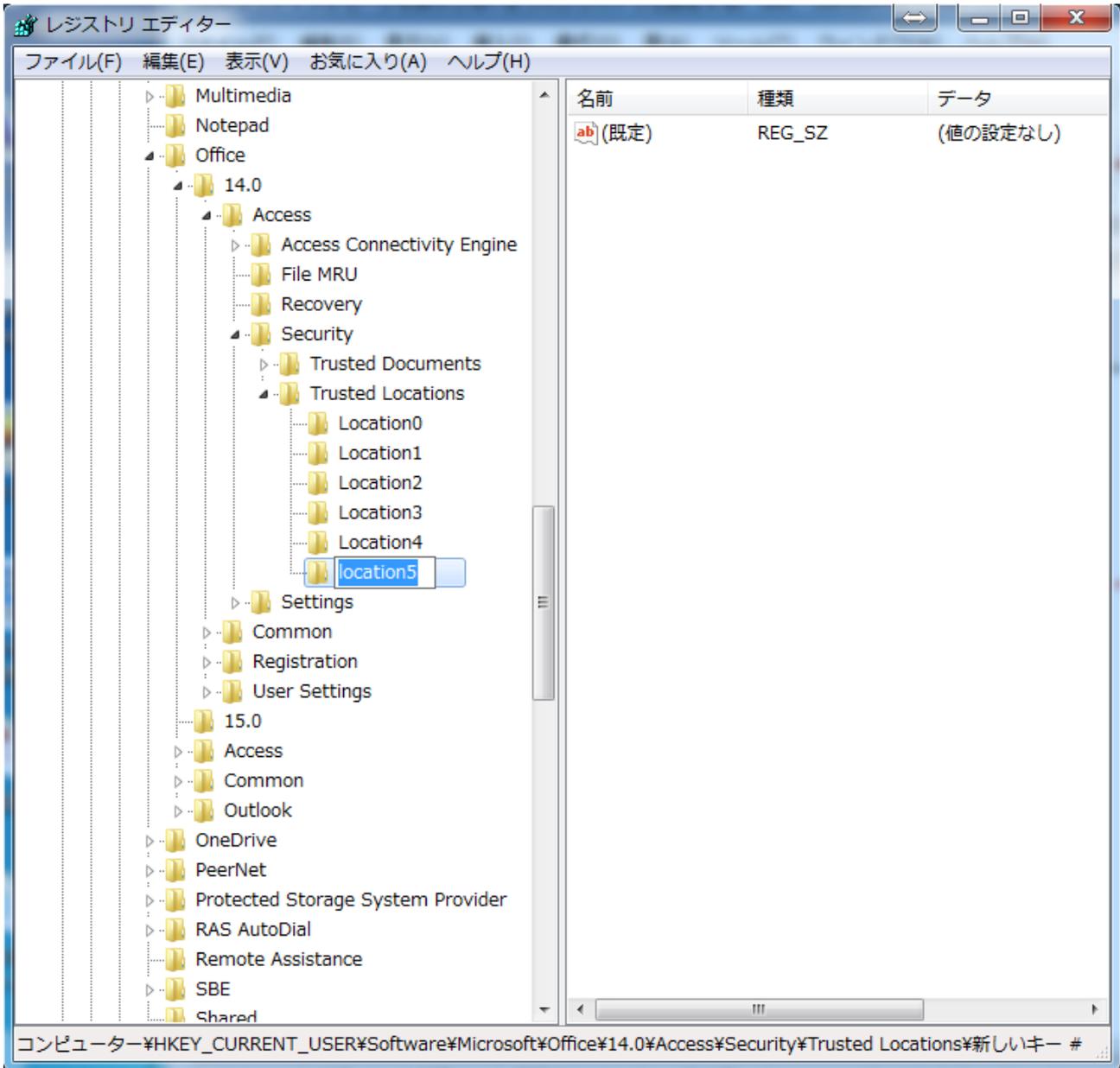


6. 新しく作成された Locations5 を右クリック → 新規 → 文字列値 を選択します。

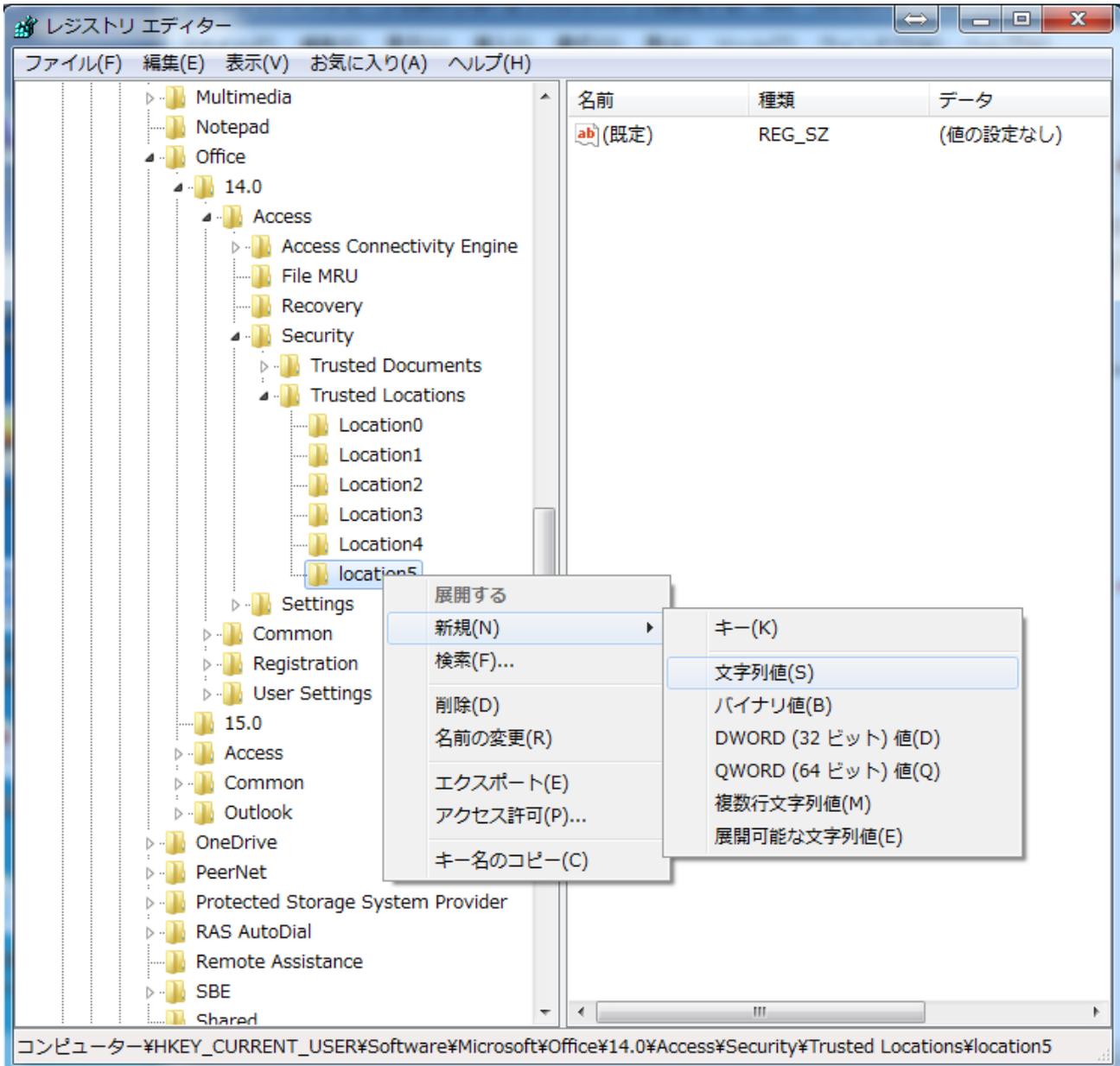

7. 「新しい値 # 1」 に 「Path」 (半角) を入力します。(あるいは名前の変更)

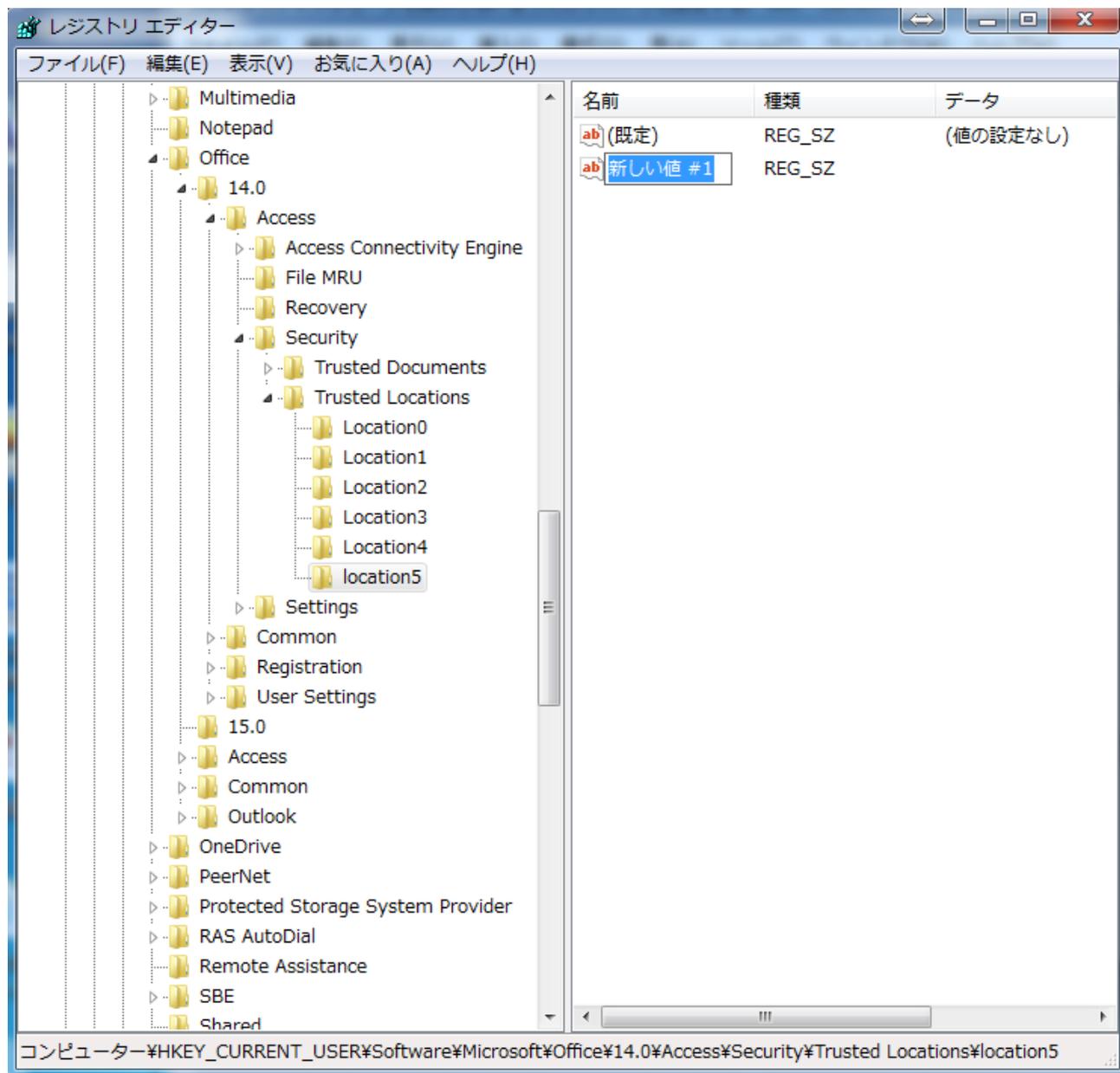

8. 新しくできた Path を右クリックして 修正を選択します。

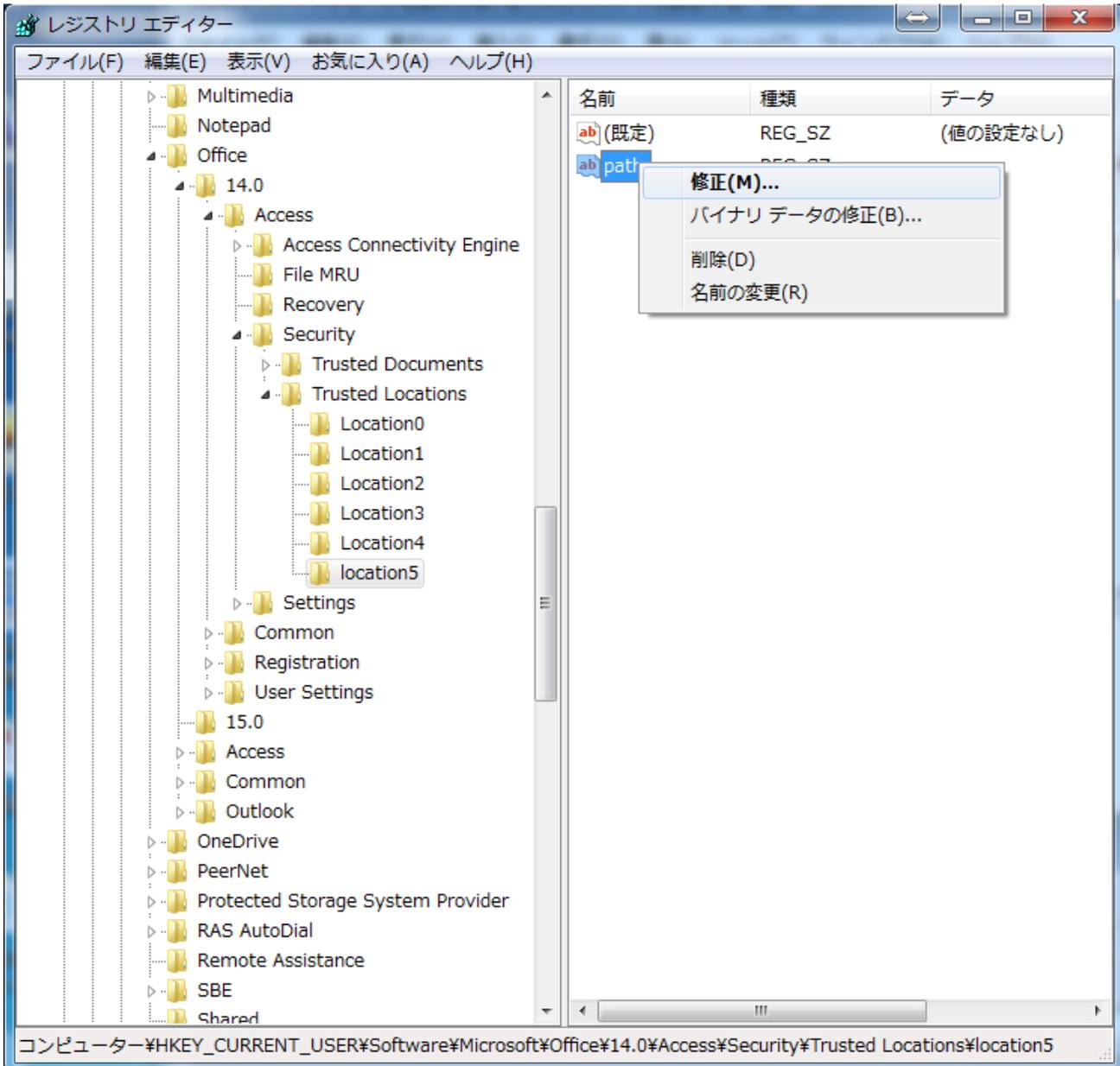


9. ご利用中のアプリにより以下の赤文字の部分を入力します。入力後、OK で完了です。

「カット Pro.21」 → C:¥cutpro21

「カット Pro.21 ペット版」 → C:¥cutpropet21

「整体・鍼灸 Pro.21」 → C:¥har i9pro21

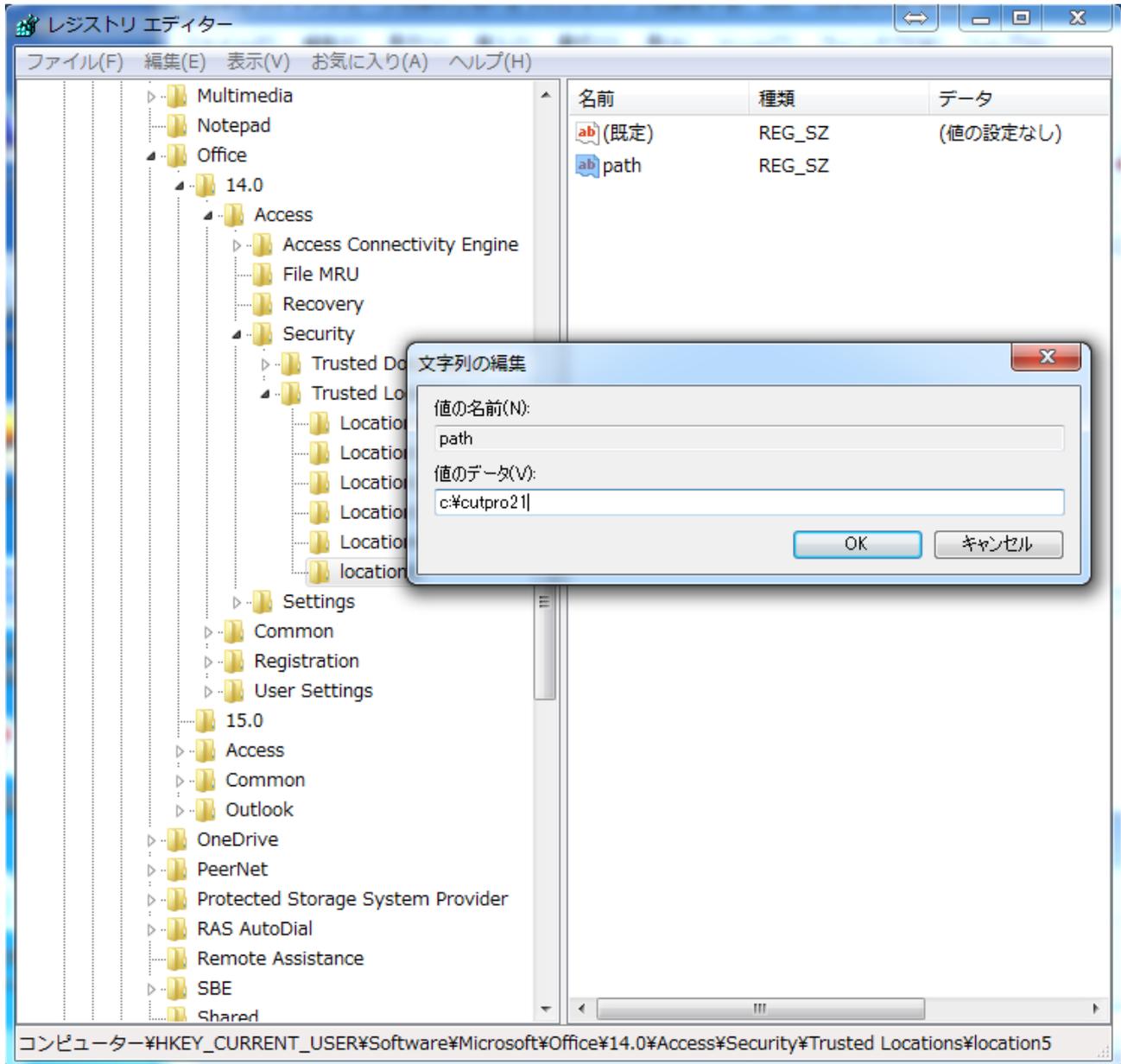

10. メニューのファイルより、レジストリエディターの終了を選択します。

